


L-820-2

レンズユニット

このたびはホーザン L-820-2 レンズユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

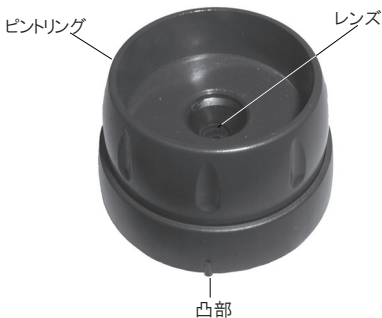

注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告…重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意…傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

本器は、L-820 デジタルCCDカメラに標準付属のカメラユニットと交換して、一般(近接でない)画像を得るためのものです。この目的以外に使用しないでください。


ご使用方法

- 1 L-820から標準のレンズユニットを取り外します。
L-820のレンズリリースボタンを押さえながら、レンズユニットを反時計方向に回し、手前に引くと外れます。




ご使用方法

- 2 L-820に本器を装着します。
L-820のハンドセットの凸部と、
本器の凸部を一直線
に合わせて挿入し、
時計方向にカチッと
クリック感があるまで
回して固定します。

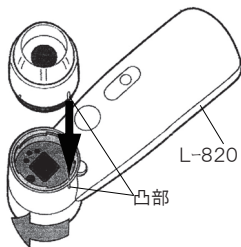

- 3 ピントリングを回してピントを合わせ
ます。
反時計方向に回しすぎると抜け落
ちますのでご注意ください。

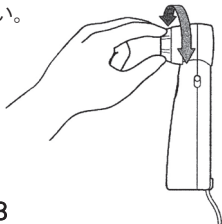

ご使用方法

アプリケーションソフトウェアの光源設定は標準のレンズユニット用のままで一般的な使用ができるようになっておりますが、必要に応じて光源設定を微調整してご使用ください。

アプリケーションソフトウェアの詳しいご使用方法は、L-820に付属のCD-ROMの中の“On Screen Manual”をご覧ください。

L-820の操作方法についてはL-820の取扱説明書をごらんください。

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
東京 TEL(03)3834-5111 FAX(03)3836-0525
大阪 TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

製品についての技術的なお問い合わせは

ホーザンテクニカルホットライン

TEL(06)6567-3132 まで


月曜日から金曜日(祝日を除く)の 9:15~12:00、13:00~17:00

L-820-2

LENS UNIT


Thank you for purchasing the HOZAN L-820-2 LENS UNIT. With proper care and handling this fine instrument will provide years of trouble-free operation. Please read this entire instruction manual carefully before attempting to place this instrument in service. Please keep this instruction manual available for reference.


Identification of parts

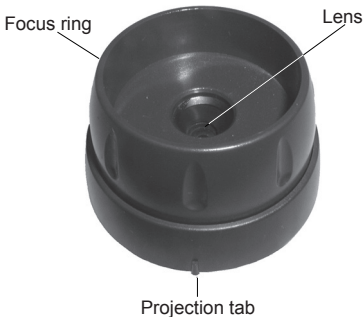


Warning and caution symbols

These symbols are used throughout the instruction manual to alert the user to potential safety hazards as follows :

 **Warning** ... Notice when incorrect handling could cause the user's death or serious injury.

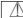 **Caution** ... Notice when incorrect handling could cause injury to the user or material damage.


Even if the instructions do not have  **Caution** mark, there are some possibilities for a serious situation. Follow the instructions.

Precautions

This lens unit is for replacing the standard lens unit of the L-820 to acquire a normal (i.e., non magnified) picture. Do not use for any other purpose.


Operation

- 1 To remove the standard lens unit from the L-820, depress the lens release button and gently turn the lens counterclockwise while pulling.

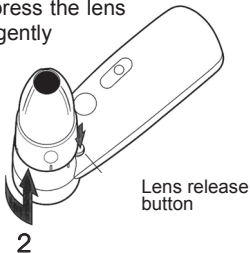


Operation

- 2** To connect this lens unit to the L-820, bring the projection tabs on both the lens unit and the L-820 into alignment. Gently insert the lens unit into the L-820, then turn it clockwise until it locks into position.

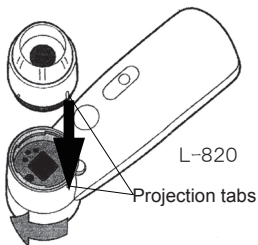

- 3** You can adjust the focus by rotating the focus ring.

Be sure not to excessively turn the focus ring in a counterclockwise direction, as it may fall out of the unit.

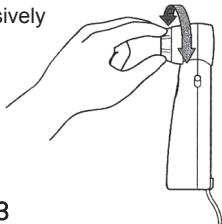

Operation

The illumination setting for the application software can be used just as it is set for the standard lens unit. However, make any fine adjustments you think are necessary.

For operating the application software of the L-820, choose the "On Screen Manual" tab from the menu in the CD-ROM that was provided with the L-820.

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

HEAD OFFICE : 1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan

Tel : (06)6562-0023

Fax : (06)6567-3115